

Karl Bachmann AG

Appareils pour médecine et recherche



RAPIDO-SEC®



Mode d'emploi

Mode d'emploi en bref

Préparation / mise en place

1. Débrancher le boîtier d'alarme.
2. Si une brève alarme retentit, c'est que la batterie est prête à fonctionner. Gardez la fiche portée de vue de l'enfant.
3. Fixer l'émetteur au capteur à l'aide des connecteurs rapides.
4. La petite lampe doit s'allumer (témoin de charge).
5. Collez l'émetteur à l'aide de la bande de fixation à l'intérieur d'un slip prêt du corps et veillez à ce que le capteur couvre bien les parties génitales. Pour ceux qui ont le sommeil agité, nous recommandons, quand cela est nécessaire, d'utiliser un ruban adhésif double face ou les boutons pression fournis pour renforcer la fixation.
6. Si votre enfant a le sommeil léger, posez le boîtier d'alarme sur la table de nuit.
7. Chez ceux qui ont le sommeil profond, il faut placer le boîtier d'alarme le plus prêt possible de la tête à l'aide d'une bande adhésive.

Lorsque l'alarme retentit

1. L'enfant doit aller immédiatement aux toilettes et vider entièrement sa vessie.
2. L'émetteur doit être débranché du capteur, lequel doit être remplacé par un capteur sec.

Le matin


1. Rebranchez la prise sur le boîtier d'alarme, sinon la batterie sera vidée inutilement.
2. Débranchez l'émetteur du capteur, même s'il est sec.
3. Complétez le tableau de succès. C'est important pour que vous et votre enfant puissiez constater les progrès.
4. Rincez bien les capteurs utilisés (tissus-contacts), mais ne les essorez pas et laissez-les bien sécher.

En cas de problème ou de question, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter par e-mail.

RAPIDO-SEC® est composé de:

1 pile:
au lithium 3 volts

2 piles AA
alcalines 1,5 volt

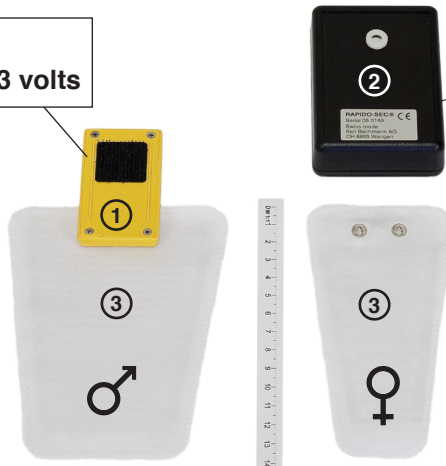


① émetteur ② boîtier d'alarme ③ capteurs (tissus-contacts)

boutons pression à coudre (fournis)

- Leur utilisation n'est pas nécessaire normalement
- C'est recommandée pour les enfants au sommeil agité ou portant un caleçon ample

Voici comment mettre RAPIDO-SEC® correctement en place:

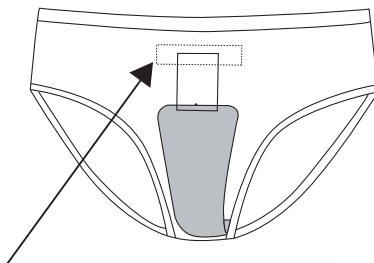

Attacher la bande de fixation à l'intérieur du slip

Karl Bachmann AG

Apparate für Medizin und Forschung

Processus d'apprentissage

Avec **RAPIDO-SEC®** vous avez adopté une méthode efficace pour lutter contre l'énurésie, basée sur un processus d'apprentissage. Lorsque nos recommandations et conseils sont suivis, le traitement aboutit presque toujours au succès.

Motivez votre enfant pour qu'il participe activement à son traitement. Plus votre enfant apprend rapidement à se réveiller et à se lever au signal, plus la durée du traitement est courte.

Conseils généraux de préparation pour l'utilisation de **RAPIDO-SEC®**

Si votre enfant mouille ses draps plusieurs fois par nuit, préparez un deuxième slip avec un tissu-contact.

Votre enfant doit apprendre à se servir de l'appareil avec la plus grande autonomie possible.

Expliquez-lui son fonctionnement et complétez ensemble le tableau de résultats. Votre enfant et vous-même pourrez ainsi visualiser les progrès réalisés dans l'apprentissage. Il trouvera lui-même la motivation pour ce traitement s'il peut suivre sa progression.

Les premières nuits

Prêtez attention particulièrement les premières nuits au fait que votre enfant se lève aussitôt après avoir entendu le signal de réveil. S'il ne se réveille pas tout de suite, réveillez-le. Il doit apprendre lors de ces premières nuits à réagir immédiatement au signal en se réveillant et en se levant. Félicitez-le à chaque fois qu'il réagit convenablement!

Normalement, quelques nuits d'apprentissage suffisent pour que le pyjama, voire le slip, ne soit plus mouillé car le patient stoppe le flux urinaire dès qu'il entend le signal. Plus tard, votre enfant se réveille tout seul en sentant que sa vessie est pleine.

L'appareil ne sonne plus - votre enfant est libéré de l'énurésie.
Nous vous recommandons de toujours avoir un deuxième tissu-contact de préparé afin de pouvoir poursuivre le traitement après un pipi au lit et le passage aux toilettes.

L'enfant a-t-il à nouveau le droit de boire le soir?

Oui!

A quels résultats faut-il s'attendre?

La rapidité de l'amélioration varie d'un enfant à l'autre.

En principe, il est possible de constater des progrès après quelques nuits seulement. Chez un enfant de 6 ans, on peut considérer que le traitement dure en moyenne 60 jours, et 70 jours environ chez un enfant de 10 ans.

Lavage des tissus-contacts

Les tissus-contacts imprégnés d'urine sont à laver dans une baignoire avec de l'eau. Utilisez de préférence une lessive en poudre plutôt qu'un savon gras. Laissez tremper les tissus-contacts pendant quelque temps pour que le lavage ne les abîme pas trop.
Surtout, n'essorez jamais les tissus-contacts!

Rincez-les dans de l'eau chaude et étendez-les pour qu'ils sèchent. Si ce n'est pas possible, étalez-les sur un radiateur ou bien séchez-les avec un sèche-cheveux. Ne mettez pas les tissus-contacts au **sèche-linge!**

Problèmes possibles

Le signal retentit lorsque l'enfant bouge beaucoup ou quand il dort sur le ventre

Cause: Les tissus-contacts ne sont pas tout à fait secs.

Conseil: Utilisez un tissu-contact complètement sec.

Test: Appuyez pendant au moins 10 secondes avec la main à plat sur le tissu-contact. Si le boîtier d'alarme se déclenche, c'est que le tissu-contact n'est pas totalement sec.

Le signal retentit dès qu'un nouveau tissu-contact a été mis en place

Cause: L'enfant ne s'est pas suffisamment bien essuyé après sa toilette.

Conseil: Mettez un nouveau tissu-contact en place.

Le signal retentit mais l'enfant n'a pas envie de faire pipi

Cause: Votre enfant transpire beaucoup ou laisse échapper des gouttes d'urine.

Conseil: Enfilez un deuxième slip à votre enfant ou placez un linge fin entre le corps et le tissu-contact.

Le tissu-contact est imprégné d'urine mais le signal de réveil n'a pas retenti

Cause: Soit les piles sont déchargées (**important:** toujours penser à rebrancher la prise dans le boîtier d'alarme) ou bien le tissu-contact est défectueux.

Conseil: Insérez de nouvelles piles (alcalines 1,5 volt) ou utilisez de nouveaux tissus-contacts.

L'enfant a peur quand le signal de réveil retentit

Conseil: Recouvrez les perforations du boîtier d'alarme avec de l'adhésif jusqu'à ce que le volume sonore ne fasse plus peur à votre enfant.

D'autres questions? Appelez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous aider et vous accompagnerons dans le traitement de l'énurésie.

**Il ne nous reste plus qu'à souhaiter à votre enfant un succès rapide avec
RAPIDO-SEC®!**

Karl Bachmann AG

Appareils pour médecine et recherche

Karl Bachmann AG

Appareils pour médecine et recherche

Zürcherstrasse 114

Tel. 055 440 44 33

Postfach

Fax 055 440 87 91

CH-8855 Wangen

service@karlbachmannag.ch

